



BRASSELER
CANADA®

VOTRE ALLIÉ

 **enLITE**
LAMPE DEL À POLYMERISER

- ▶ Conduit de lumière pivotant sur 360°
- ▶ Longueur d'onde de 420 à 490 nm
- ▶ Affichage numérique
- ▶ Appareil sans fil, léger
- ▶ Batterie au lithium ionique puissante



▶ Consultez notre site web BrasselerCanada.com
Téléphone : **800.363.3838** · Télécopieur : **866.330.4454**




► 3 MODES DE POLYMÉRISATION

1 | MODE PLEINE PUISSANCE

Fonctionnement à pleine puissance pour une polymérisation optimale et rapide.


DURÉE DU CYCLE 5 s par défaut

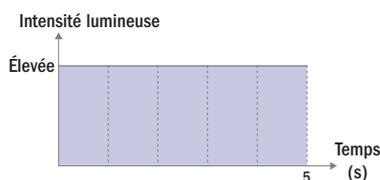

2 | MODE MONTÉE EN PUISSANCE

L'intensité lumineuse augmente progressivement jusqu'à pleine puissance afin de réduire le retraissement des composites pendant la polymérisation.


DURÉE DU CYCLE 10 s par défaut

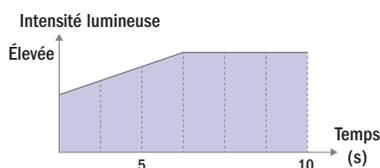

3 | MODE PULSÉ

L'appareil s'allume et s'éteint à toutes les demi-secondes pour réduire l'échauffement.

DURÉE DU CYCLE 15 s par défaut

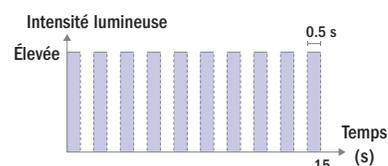


► ACCESSOIRES

N° de commande	Nom de l'article
5027698U0	Conduit de lumière*
5027969U0	Boîte de manchons barrières
5028039U0	Manchon antireflet*
5028040U0	Cône antireflet*
5027701U0	Bloc d'alimentation*

*Compris avec l'ensemble complet

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lampe DEL :	5 W
Intensité lumineuse :	1 600 mW/cm
Plage de longueurs d'onde :	420 à 490 nm
Dimension de la sonde :	8 mm
Poids de la pièce à main :	160 g
Garantie :	1 an

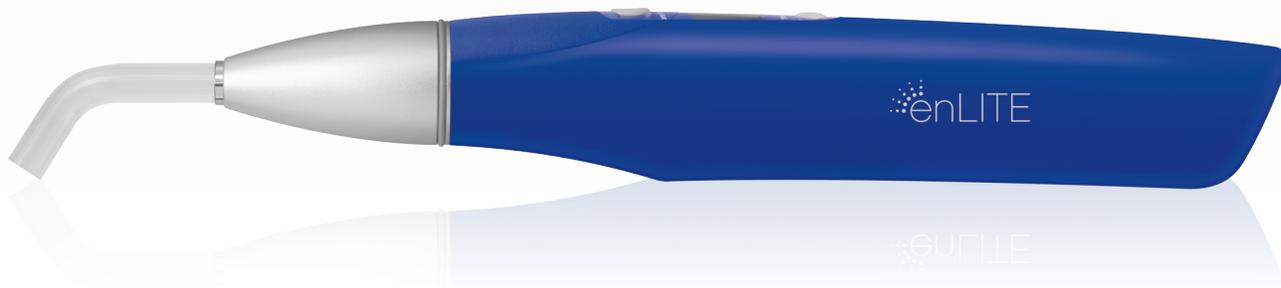

► Consultez notre site web BrasselerCanada.com
Téléphone : 800.363.3838 · Télécopieur : 866.330.4454

