



BRASSELER
CANADA®

ENDOSEQUENCE^{MD} CM

LIMES À EFFET DE MÉMOIRE CONTRÔLÉ

*L'équilibre parfait entre la
robustesse et la souplesse*

VOTRE ALLIÉ




ENDOSEQUENCE^{MD} CM

LA CONCEPTION BREVETÉE DES LIMES ENDOSEQUENCE^{MD}

La première lime EndoSequence a été mise sur le marché il y a 15 ans. Malgré l'apparition d'un grand nombre de limes concurrentes, jusqu'à ce jour, la lime EndoSequence demeure l'une des limes les plus populaires. Les limes EndoSequence se distinguent par leur conception brevetée et leur fabrication de qualité supérieure, qui leur assurent une place parmi les limes les plus efficaces sur le marché.

TOUS LES ATTRIBUTS DES LIMES ENDOSEQUENCE^{MD} QUE VOUS AIMEZ, EN MIEUX

La fabrication des limes EndoSequence CM fait appel à des technologies évoluées de métallurgie et de traitement thermique du nitinol pour assurer la fidélité des bords tranchants et leur conférer une résistance supérieure à la fatigue sous des charges cycliques. Les limes EndoSequence CM offrent aux cliniciens une solution plus souple et un instrument sensiblement plus résistant aux bris.

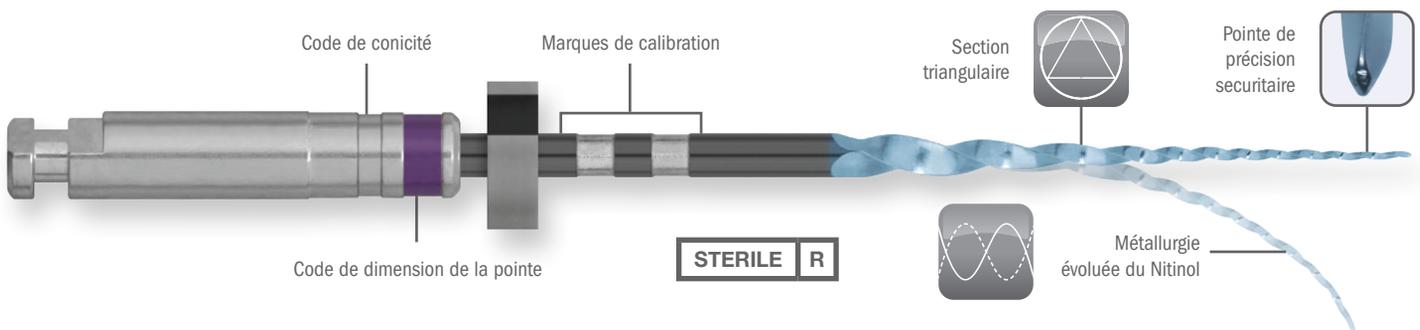

OFFRE DE PRODUITS ENDOSEQUENCE^{MD} CM (4/PAQUET)

Les limes EndoSequence CM sont fournies dans des emballages-coques stériles contenant quatre instruments.

STERILE R



Code couleur	Dim. de l'embout	Conicité : 0,04		Conicité : 0,06	
		21 mm	25 mm	21 mm	25 mm
△ Blanc	15	5026609U0	5026617U0	5026633U0	5026639U0
▲ Jaune	20	5026610U0	5026618U0	5026634U0	5026640U0
▲ Rouge	25	5026611U0	5026619U0	5026635U0	5026641U0
▲ Bleu	30	5026612U0	5026620U0	5026636U0	5026642U0
▲ Vert	35	5026613U0	5026621U0	5026637U0	5026643U0
▲ Noir	40	5026614U0	5026622U0	5026638U0	5026644U0
△ Blanc	45	5026615U0	5026623U0	–	–
▲ Jaune	50	5026616U0	5026624U0	–	–

Code couleur	Dim. de l'embout	Conicité variable			
		19 mm	21 mm	25 mm	31 mm
▲ N/A	SX/19	5027891U0	–	–	–
▲ Pourpre	S1/18	–	5027892U0	5027899U0	5027906U0
△ Blanc	S2/20	–	5027893U0	5027900U0	5027907U0
▲ Jaune	F1/20	–	5027894U0	5027901U0	5027908U0
▲ Rouge	F2/25	–	5027895U0	5027902U0	5027909U0
▲ Bleu	F3/30	–	5027896U0	5027903U0	5027910U0
▲ Noir	F4/40	–	5027897U0	5027904U0	5027911U0

PRODUIT BRASSER DE QUALITÉ SUPÉRIEURE


Les limes EndoSequence CM sont des limes en NiTi de qualité ultrasupérieure conformes à des normes extrêmement rigoureuses de contrôle de la qualité. Chaque étape de leur fabrication est soumise à des contrôles méticuleux, y compris notre procédé exclusif d'électropolissage qui leur confère les tranchants les plus propres et les plus acérés offerts sur le marché. Les limes EndoSequence CM sont fournies dans des emballage-coques stériles pour que vous ayez l'assurance d'utiliser la lime la plus propre et la plus efficace lors de chaque procédure.

POLISSAGE ÉLECTROLYTIQUE DE LA SURFACE

- Élimine les imperfections de la surface qui affaiblissent les autres limes
- Augmente le tranchant des limes




Lime
EndoSequence^{MD} CM

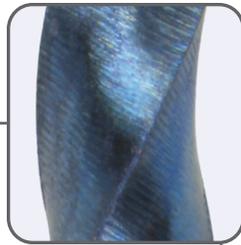


Lime
Vortex Blue^{MC}

EXTRÉMITÉ CONÇUE AVEC PRÉCISION

- L'extrémité est non-active, et entièrement active à exactement 1 mm

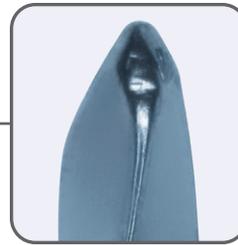

Lime
EndoSequence^{MD} CM

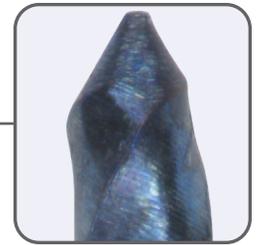

Lime
Vortex Blue^{MC}


MÉTALLURGIE ÉVOLUÉE DU NITINOL

- Résistance supérieure à la fatigue sous des charges cycliques
- Prépliables pour vous permettre d'atteindre les endroits difficiles d'accès
- Conçues pour se déformer avant de se briser
- Fidélité maximale des tranchants à la température du corps



CONCEPTION BREVETÉE DU PCA (POINT DE CONTACT ALTERNIF)

- Permet de centrer la lime à l'intérieur du canal sans méplat radian
- Empêche le « vissage » et réduit les risques de fausse route
- Facilite l'enlèvement des débris
- Maximise l'efficacité de coupe

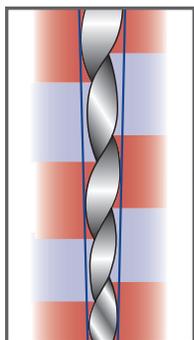

AUCUN MÉPLAT RADIAN

- Flexibilité optimale
- Minimisation du couple
- Épaisseur moindre des parois transversales
- Bord tranchant acéré



Contact à
3 points



Contact à
2 points



Contact à
1 point



Aucun
contact

EMBALLAGE STÉRILE

- Élimine la contamination croisée
- Rehausse l'efficacité du cabinet dentaire


STERILE R



FRAISES DIAMANTÉES



FRAISES AU CARBURE

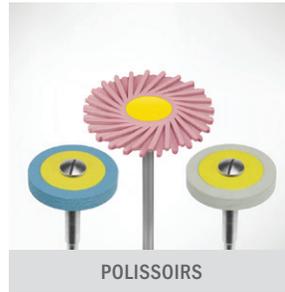

POLISSOIRS



SYSTÈMES DE PROCÉDURE



BIOCÉRAMIQUES



Depuis 1976, nous nous consacrons exclusivement à la mise au point de produits et à la présentation de services qui soutiennent les procédures fondamentales des cabinets dentaires. Aujourd'hui, Brasseler est le chef de file des instruments dentaires en Amérique du Nord et offre la gamme d'instruments de dentisterie et de chirurgie la plus exhaustive qui soit, vendue sous une seule marque.



PIÈCES À MAIN



MATÉRIEL D'ENDODONTIE



PETITS ÉQUIPEMENTS



INSTRUMENTS D'HYGIÈNE



INSTRUMENTS À MAIN



FOURNITURES CHIRURGICALES



FOURNITURES DE LABORATOIRE



Commandez en ligne à BrasselerCanada.com
ou appelez le 800.363.3838.

