



BRASSELER
CANADA®



EVERclean
APPAREIL D'ENTRETIEN



VOTRE ALLIÉ

EVERclean

D'une conception axée sur la commodité, l'appareil d'entretien EverClean est la solution parfaite pour les cabinets achalandés d'aujourd'hui. Ses cycles combinés de lubrification et de purge assurent un entretien rapide, facile et sans tracas qui permettra à vos pièces à main de continuer de fonctionner comme si elles étaient neuves. Abordable, rapide et efficace, EverClean est une solution idéale qui répondra à tous vos besoins en matière d'entretien de pièces à main.

Appareil d'entretien EverClean^{MC}


5028208U0

· Garantie de deux ans




Comprend **trois sorties** pour accessoires pneumatiques ou électriques. Adaptateurs offerts pour la majorité des pièces à main et accessoires.

Adaptateurs vendus séparément

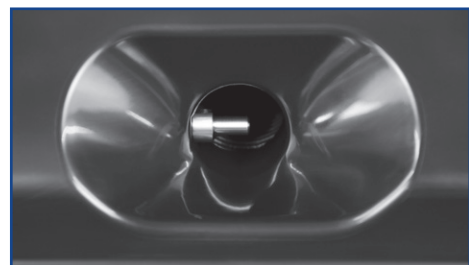

La **soupape d'aspiration interne** crée un effet de vide pour aspirer les plus grosses gouttelettes d'huile de la chambre de nettoyage et ainsi faciliter le nettoyage

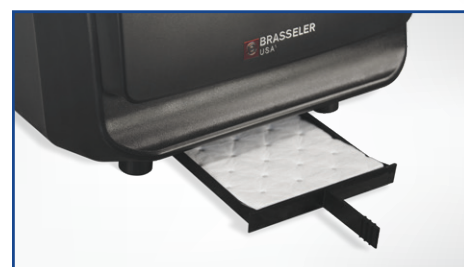

Le **bac à huile** amovible et les **feuilles absorbantes oléophiles** recueillent les excès d'huile et les débris pendant le cycle de purge.



Le **panneau d'affichage** simple vous permet de sélectionner les postes d'entretien de pièce à main, d'activer le cycle de nettoyage du mandrin et d'ajuster la durée du cycle au besoin, et ce, en toute facilité.



Le **poste de nettoyage des mandrins** est conçu pour améliorer les performances et prolonger la durée de vie de votre pièce à main.



Atomiseur EverCleanTM
5028210U0

· Aérosol de 500 ml
· Plus de 400 utilisations par atomiseur

Bombe aérosol vendue séparément

L'**écran de porte** amovible capte les excès d'huile et les débris de manière à faciliter le nettoyage et il peut être remplacé au besoin.

ACCESSOIRES EVERclean



Atomiseur
EverClean^{MC} (500 ml)
5028210U0



Feuilles absorbantes
oléophiles EverClean^{MC} (10/Pqt)
5028209U0



Écran de porte
EverClean^{MC} (3/Pk)
5028220U0

ADAPTATEURS HAUTE VITESSE PNEUMATIQUE



Adaptateur EverClean^{MC} Kavo^{MD}
5028211U0



Adaptateur EverClean^{MC} W&H^{MD}
5028212U0



Adaptateur EverClean^{MC} Brasseler/NSK^{MD}
5028213U0



Adaptateur EverClean^{MC} Sirona^{MD}
5028216U0



Adaptateur EverClean^{MC} Midwest^{MD}
5028217U0



Adaptateur EverClean^{MC} Star^{MD}
5028218U0

ADAPTATEURS BASSE VITESSE ET ÉLECTRIQUE



Adaptateur EverClean^{MC} type « E »
5028214U0



Adaptateur EverClean^{MC} Midwest^{MD}
5028219U0

KaVoMD est une marque déposée de Kaltenbach & Voigt GmbH (Allemagne). MidwestMD est une marque déposée de DENTSPLY International. NSKMD est une marque déposée de Nakanishi, Inc. SironaMD est une marque déposée de Dentsply Sirona, Inc. StarMD est une marque déposée de DentalEZ, Inc. W&HMD est une marque déposée de W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH (Autriche).

Consultez notre site web Shop.Brasseler.ca

Téléphone : 800.363.3838 • Télécopieur : 866.330.4454

